

Sendoline[®]

PERFECT ENDO



S5[®]

ROTARY SYSTEM



S5[®] ROTARY SYSTEM

S5[®] Endo Motor

SÛR, SIMPLE ET EFFICACE !

Système innovant de Sendoline pour le nettoyage mécanisé. L'endodontie simplement parfaite !

Caractéristiques :

1. Facile à utiliser

S5[®] Endo Motor + S5[®] Rotary Files = S5[®] Rotary System
Utilise seulement 5 réglages avec 5 limes (S5[®] Rotary Files)
Polyvalence totale, fonctionne avec la plupart des systèmes endodontiques.
Sans fil

2. Sécurité

2 options : auto-reverse / auto-stop
Indicateur de torque : un témoin lumineux signale lorsque le torque est atteint à 75 % de sa valeur.
Faible vitesse : 300 tours/min

3. Temps de traitement réduit

Traitement réalisé de manière sûre et plus efficace grâce au S5[®] Rotary System et ses limes avec le design unique S-File.

4. Accessibilité

Tête du contre-angle d'un diamètre de seulement 11 mm
Mandrin raccourci (13 mm) sur les limes rotatives.

5. Non-stop

2h30 de fonctionnement continu.

6. Ergonomie

Poids : 120 g

7. Apex Clip

Branchement aisé à un localisateur d'apex.


S5[®] Apex Clip

Maintenant avec un clip apex pour un branchement aisé à un localisateur d'apex.

Sûr et sécurisé

Un témoin lumineux signale lorsque le torque est atteint à 75 % de sa valeur.

5 réglages = 5 limes

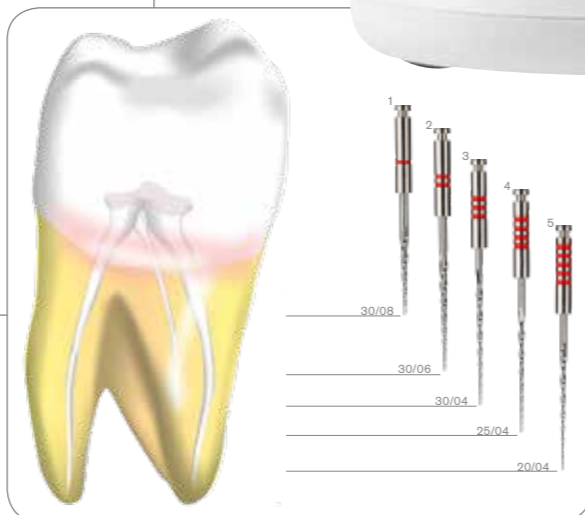

www.sendoline.com

S5[®] Rotary Files



30/08 30/06 30/04 25/04 20/04
ISO/CONICITE



Design S-File

18 mm
23 ou 28 mm

1, 2, 3, 4, 5 – CINQ ETAPES POUR UNE ENDODONTIE PARFAITE.

Le système de préparation endodontique Rotary System de Sendoline vous offre une solution simple et efficace.

Caractéristiques :

1. Seulement 5 limes, avec le design unique S-File
2. Mandrin raccourci (13 mm) pour une accessibilité accrue
3. Lames longues à pas progressif pour prévenir les vissages
4. Elimination optimale des débris
5. Conçues pour une utilisation avec le S5[®] Endo Motor

"Le système de limes S5 n'est pas seulement simple d'emploi, il procure également des résultats prédictibles !"

Dr. Paul Godbold, Omnipraticien, Angleterre

"Le S5 Rotary System permet de réaliser des préparations endodontiques de manière sûre et efficace pour le nettoyage, la désinfection et l'obturation optimum, et cela quel que soit le canal à traiter."

Dr. Claire Redley, Omnipraticienne, Angleterre

S5[®] Apex Locator

Un localisateur d'apex électronique ultraprécis qui permet de mesurer précisément la longueur de travail endodontique. Son design compact le rend portable et très facile d'emploi.

Caractéristiques :

1. Localisation de haute précision du foramen apical dans les canaux secs ou humides
2. Mesures entièrement automatiques
3. Design compact et convivial
4. Fonction arrêt automatique
5. Indicateur sonore avec contrôle du volume



Préparation

Big Apical Files

Comment préparer les apex plus larges que la taille 30 ?

Pour de meilleurs résultats au niveau des diamètres apicaux plus larges, les limes Big Apical Files complètent avantagement le S5® Rotary System. Après utilisation des limes de préparation S5®, finir au niveau de la partie apicale avec les limes Big Apical Files.

Tailles disponibles : ISO/Conicité 35/04 à 50/04.

Longueurs : 23 et 28 mm.



Obturation

S5® GP Points

Comment obturer les canaux préparés avec le S5® Rotary System ?

Les pointes de gutta percha S5® de Sendoline sont spécifiquement conçues pour s'adapter aux préparations endodontiques réalisées avec les limes S5® Rotary Files. Finir la préparation avec une lime n° 2 ou n° 3, puis sélectionner la pointe de gutta percha S5® correspondant à celle-ci. Tailles disponibles (ISO/Conicité) : n° 2 (30/06) ou n° 3 (30/04). Conditionnement : boîte de 60 pointes.

S5® Paper Points

Les pointes de papier S5® de Sendoline, roulées aux dimensions exactes, simplifient les traitements endodontiques grâce à leur excellent pouvoir d'absorption et leur emploi conjugué aux pointes de gutta percha S5®. Tailles disponibles (ISO/Conicité) : n° 2 (30/06) ou n° 3 (30/04). Conditionnement : boîte de 60 pointes.



Retraitement

S5® Retreatment Files

Les limes de retraitement S5® permettent d'éliminer rapidement et facilement les anciens matériaux d'obturation endodontique. Pour réaliser le retraitement endodontique, il suffit d'employer 4 limes seulement, selon la technique Crown-Down. Les marquages des limes de retraitement correspondent aux programmes du S5® Endo Motor. Tailles disponibles (ISO/Conicité) : Lime 1 (30/12) longueur 17 mm - Limes 2 à 4 (30/08, 30/06, 30/04) longueur 23 mm.



Sendoline®
PERFECT ENDO



et S5 sont des marques déposées par Sendoline AB.

Sendoline AB
Box 7037, Tillverkarvägen 6
SE-187 11 Täby, Suède
Tel: +46 (0)8 445 88 30
info@sendoline.com www.sendoline.com