


Sendoline®

PERFECT ENDO

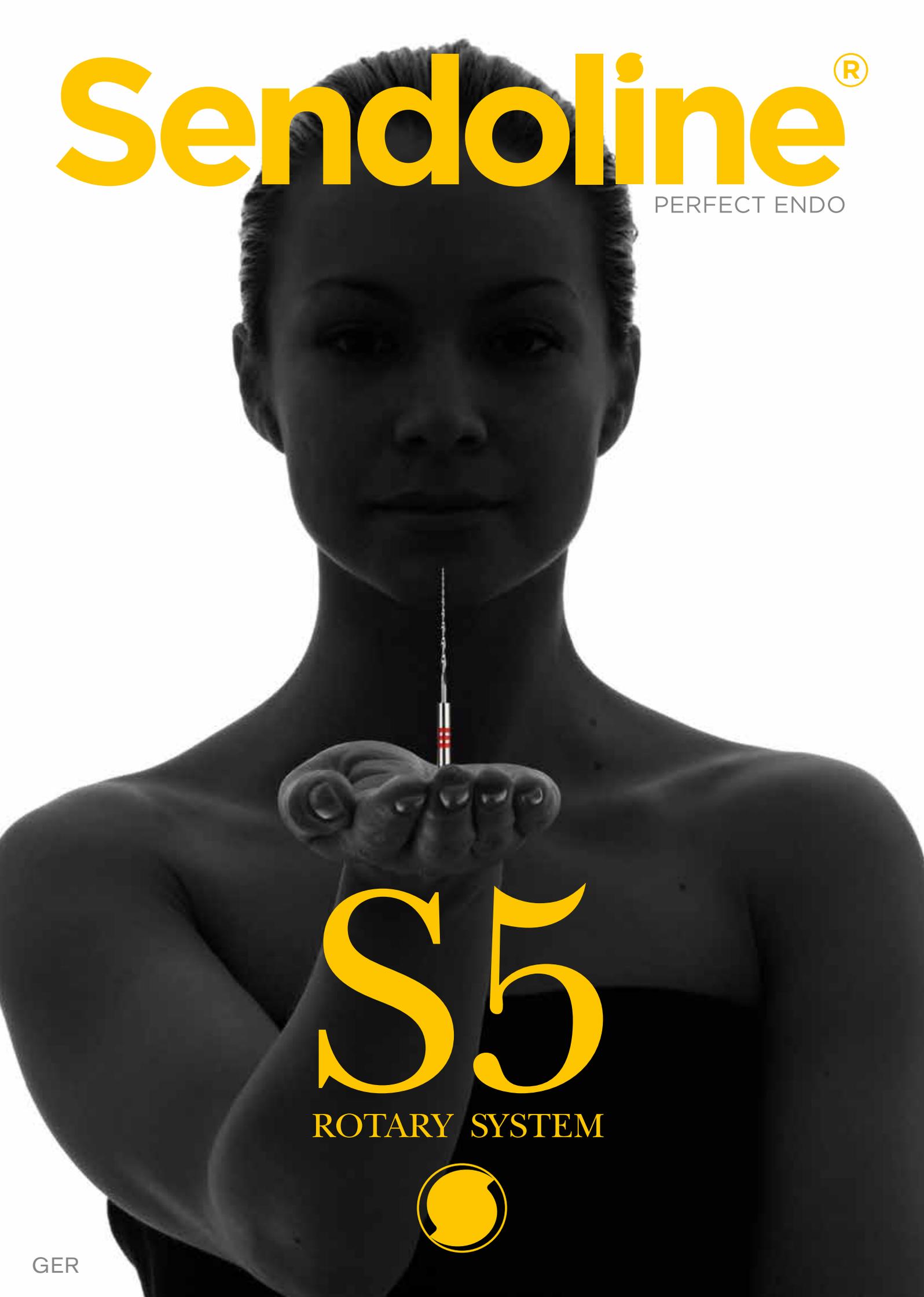

S5

ROTARY SYSTEM



S5 ROTARY SYSTEM

S5 Endo Motor

SICHER, EINFACH UND EFFIZIENT!

Sendoline's innovatives System für maschinelle Wurzelkanalaufbereitung. Einfach gesagt: „Perfect Endo“

Eigenschaften:

- Anwenderfreundlich**
 - S5 Endo Motor + S5 Rotary Files = S5 Rotary System
 - 5 Drehmomenteinstellungen für 5 Feilen
 - Sehr vielseitig einsetzbar
 - Funktioniert nahezu mit allen rotierenden Feilensystemen
 - Kabellos für absolute Bewegungsfreiheit
- Sicher**
 - Auto Reverse / Auto Stop
 - Kontroll-LED-Ring: Leuchtet sobald 75% des eingestellten Drehmoments erreicht werden
 - Stabile Drehzahl von 300 rpm
- Verkürzte Behandlungszeiten**
 - Durch die Anwendung des S5 Rotary System mit dem einzigartigen S-Profil kann die Behandlung sicher, schnell und effizient durchgeführt werden.
- Bestmöglicher Zugang zur Behandlungsstelle**
 - Kleiner Kopf (11mm Diameter) für bestmögliche Sicht bei der Behandlung
 - S5 Rotary Files mit einer Schaftlänge von nur 13mm für optimale Zugänglichkeit zur Behandlungsstelle
- Lange Betriebsdauer**
 - Ausdauernder Li-Ionen-Akku mit einer Betriebsdauer von 2,5 h für effektives Arbeiten
- Leicht und ergonomisch**
 - Den ergonomischen Anforderungen entsprechend geformtes Winkel- und Antriebshandstück
- Apex Clip**
 - Einfache Verbindung zu Ihrem Apex Locator.


Apex Clip

Jetzt mit Apex Clip für eine einfache Verbindung mit Ihrem Apex Locator.

Sicher

Leuchtet sobald 75% des eingestellten Drehmoments erreicht werden

5 Einstellungen = 5 Feilen

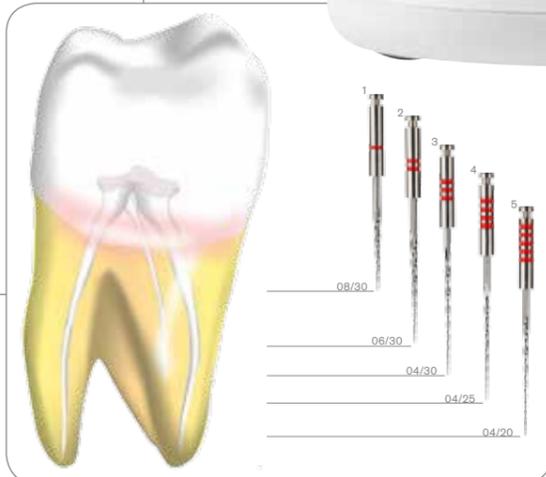

S5 Rotary Files



1, 2, 3, 4, 5 – FÜNF SCHRITTE ZUR PERFEKTEN WURZELKANALAUFBEREITUNG

Das S5 Rotary System von Sendoline - eine einfache und effektive Lösung für den Zahnarzt

Eigenschaften:

- Nur 5 Feilen - alle sind ausgestattet mit dem einzigartigen S-Profil
- Verkürzter Schaft (13mm) für einen verbesserten Zugang zur Behandlungsstelle
- Lang gezogenes Feilenprofil um ein Feststecken der Feile im Wurzelkanal zu verhindern
- Verbesserter Abtransport des Debris aus dem Wurzelkanal
- Speziell entwickelt für die Anwendung mit dem S5 Endo Motor

„Das S5 Rotary System hilft mir auf sichere und effiziente Weise jeden Wurzelkanal aufzubereiten und so eine ideale Basis für die anschließende Reinigung, Desinfektion und Obturation zu schaffen.“
Dr. Claire Redley BDS General Practitioner, UK

S5 Apex Locator

Vollautomatischer Apex-Lokalisator, der mit höchster Präzision die Wurzelkanallänge misst. Sein kompaktes Design macht das Produkt ergonomisch und erleichtert die Anwendung für den Zahnarzt.

Eigenschaften:

- Präzise Bestimmung des Apex in trockenen und nassen Wurzelkanälen
- Vollautomatische Messung
- Kompaktes und anwenderfreundliches Design
- Automatische Ausschaltfunktion
- Audio-Feedback mit Lautstärkenregelung



Behandlung

Big Apical Files

Big Apical Files von Sendoline sind ideal für die Wurzelbehandlung von Zähnen mit Kanälen deren apikaler Durchmesser grösser als 30 ist. Big Apical Files sind eine ideale Ergänzung für das S5 Rotary System. Hierbei wird für eine optimale Aufbereitung zuerst der Wurzelkanal mit den S5 Rotary Files vorbereitet und dann mit den Big Apical Files finalisiert.
Größen: TAPER/ISO 04/35 – 04/50
Längen: 23 mm / 28 mm



Obturation

S5 GP Points

Die S5 Gutta Percha Points tragen zu einer perfekten Obturation des Wurzelkanals nach der Aufbereitung mit den S5 Rotary Files bei. Die S5 GP Points wurden speziell gestaltet, um den durch die S5 Rotary Files geformten Kanälen zu entsprechen. Dabei wird die Aufbereitung mit der Feile Nr. 2 oder Nr. 3 beendet und die entsprechenden S5 GP Points (S5 GP Points 2 oder S5 GP Points 3) für die Obturation gewählt. Verpackungseinheit: 60 Stk.

S5 Paper Points

Die S5 Paper Points 2 bzw. 3 werden mit hoher Präzision handgerollt. Sie erleichtern mit ihrer starken Saugfähigkeit die Wurzelkanalbehandlung und sind so die optimale Ergänzung für die S5 GP Points.
Größen: TAPER/ISO = 2 (06/30) und 3 (04/30)
Verpackungseinheit: 60 Stk.



Nachbehandlung

S5 Retreatment Files

Das S5 Retreatment System ermöglicht auf einfache Weise die Entfernung von alten Wurzelkanalfüllungen. Um eine erneute Wurzelkanalbehandlung durchzuführen, verwendet man einfach die vier S5 Retreatment Files mit der Crown-Down-Technik. Die Kennzeichnung der S5 Retreatment Files (1-4) entsprechen den Drehmomenteinstellungen (1-4) des S5 Endo Motor.
Größen: TAPER/ISO: Feile 1: 12/30; Feile 2-4: 08/30, 06/30
Länge: Feile 1 17 mm, Feile 2-4 23 mm

