

# Sendoline<sup>®</sup>

PERFECT ENDO



# S5

ROTARY SYSTEM



# S5 ROTARY SYSTEM

## S5 Endo Motor

### SNABBT, SÄKERT OCH EFFEKTIVT!

Sendolines innovativa system för maskinell rensning. Allt du behöver inom modern endodonti. Perfect Endo helt enkelt!


#### Produktfördelar:

- 1. Enkelt**  
S5 Endo Motor + S5 Rotary Files = S5 Rotary System  
5 program - 5 filar (S5 Rotary Files)  
Fungerar med de flesta maskinella filsystem  
Sladdlös
- 2. Säkert**  
Två inställningar: Autoreversering / Autostopp  
Kontroll: Ljusindikering när 75% av torquevärdet är uppnått. Varvtal: 300 rpm
- 3. Tidseffektivt**  
Behandlingen är klar inom några minuter vid användning av S5 Rotary Files tack vare den unika S-profilen
- 4. Bättre åtkomst**  
Huvudet är endast 11 mm i diameter  
Kortare skaft (13 mm) på de maskinella filarna
- 5. Non-stop**  
2,5 timmes effektiv användning
- 6. Ergonomiskt**  
Vikt: 120g
- 7. Apex Clip**  
Enkel anslutning till apexlokalisator

**S5 Apex Clip**  
Nu med apexclips för enkel anslutning till apexlokalisator.

**Säkert**  
Ljusindikering visar när 75% av torquevärdet är uppnått.

#### 5 program = 5 filar

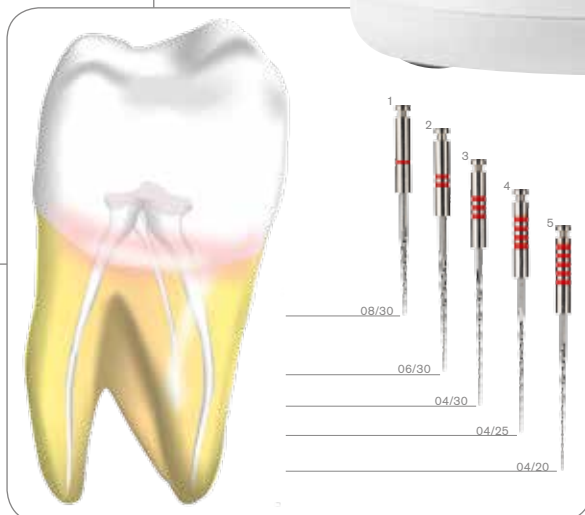

[www.sendoline.com](http://www.sendoline.com)

## S5 Rotary Files



### 1, 2, 3, 4, 5 – FEM ENKLA STEG TILL PERFECT ENDO

Det maskinella filsystemet från Sendoline erbjuder ett enkelt och effektivt system för tandläkaren.

#### Produktfördelar:

1. Endast 5 filar - samtliga med den unika S-profilen
2. Kortare skaft (13 mm) för bättre åtkomst
3. Långa utdragna skärande eggar minskar risken för "screw-in" effekten
4. Förbättrad transport av debris
5. Framtagna och avsedda för att användas tillsammans med S5 Endo Motorn

"Äntligen ett enkelt och tryggt system med nya S5 Motorn."  
*Karla Reigo, Privattandläkare, Stockholm*

"Det nya konceptet från Sendoline är helt i linje med vad dagens tandläkare vill ha."  
*Johan Ohlin, specialisttandläkare i endodonti, Stockholm.*

## S5 Apex Locator

Helautomatisk apexlokalisator som med hög precision enkelt mäter rensdjupet på rotkanalen i förhållande till apex. Dess kompakta design gör produkten portabel och lätthanterlig för tandläkaren.

#### Produktfördelar:

1. Lokalisering av apex i blöta och torra kanaler med hög precision
2. Helautomatiskt mätfunktion
3. Kompakt och användarvänlig design
4. Automatisk avstängning
5. Ljudindikator med volymkontroll





## Preparation

### Big Apical Files

Med Big Apical Files kan du enkelt vid behov bredda den apikala delen av kanalen. Används gärna som ett komplement till S5 Rotary Files och finns i storlekarna: TAPER/ISO 4/35-4/50 och i längderna 23mm och 28mm



## Obturation

### S5 GP Points

Sendolines S5 GP Points underlättar rotkanalsfyllningen då dess storlek och passform är direkt anpassade för de maskinella S5 Rotary Files. Avsluta preparationen med fil nr. 2 eller 3 och obturera med motsvarande. Förpackning: 60 st/fp



### S5 Paper Points

Sendolines S5 Paper Points är specialtillverkade med exakta dimensioner och mycket bra uppsugningsförmåga för att underlätta rotkanalsbehandlingen och fungerar perfekt tillsammans med S5 GP Points. Konicitet / ISO: 2 (6/30) och 3 (4/30). Förpackning: 60 st/fp



## Retreatment

### S5 Retreatment Files

Med S5 Retreatment System avlägsnar du gammal guttaperka enkelt och snabbt. Används med standard Crown Down teknik och endast 4 filar. Filarnas markering motsvarar respektive program (1, 2, 3 & 4) på S5 Endo Motorn.

