

Sendoline®

PERFECT ENDO

S1 - REZIPROKES EIN-FEILEN-SYSTEM



Einfach. Sicher. Vollständig.

Mit dem S1-System können Sie Ihre Wurzelbehandlung mit einem einzigen mechanischen Instrument durchführen. Das intelligente S1-Winkelstück verfügt über ein einzigartiges integriertes Getriebe, das die reziproke Bewegung direkt im Winkelstück erzeugt und so einen glatten Betrieb ermöglicht.

Sie schließen das Winkelstück direkt an Ihre Dental-einheit an, ohne einen externen Motor zu benötigen. S1 Plus Standard 25/06 wird für die meisten

Fälle verwendet. Wählen Sie S1 Plus Small 15/06, wenn Sie enge oder gekrümmte Kanäle behandeln, und S1 Plus Large 40/04 für größere Kanäle.

Das S1-System umfasst auch sterile Packungen mit Papier- und Guttapercha-Spitzen in der entsprechenden Größe für die S1 Plus Standard und S1 Plus Large Instrumente.

S1 – ein komplettes Kompaktsystem.



S1 Plus Start Up Set 2.0*

REF OP0007

Inhalt:

- 1 x S1-E contra-angle handpiece incl. 1 apex clip
- 6 x S1 Plus Treatment Pack**
- 1 x S1 Plus Standard 25/06 - 25 mm
- 1 x S1 Plus Small 15/06 - 25 mm
- 1 x S1 Plus Large 40/04 - 25 mm

*Insgesamt 30 S1 Plus-Instrumente.



**S1 Plus Treatment Pack

(ausreichend für zwei Wurzelbehandlungen)

2 x K-File 10 STERILE - 25 mm

2 x K-File 15 STERILE - 25 mm

2 x S1 Plus Standard 25/06 - 25 mm

Sendoline®


PERFECT ENDO

S1 PLUS INSTRUMENT

Wirksam. Flexibel. Sicher.



Das S1 Plus-Instrument verfügt über das einzigartige S-Profil von Sendoline mit doppelten Schneidkanten und ist somit optimal für die reziproke Bewegung des S1-Systems geeignet. Der progressive Steigungswinkel und die abgerundete Spitze des Instruments sorgen für Flexibilität und erleichtern das Sondieren des Kanals. S1 Plus Standard 25/06 wird für die meisten Fälle verwendet. Wählen Sie S1 Plus Small 15/06, wenn Sie enge oder gekrümmte Kanäle behandeln, und S1 Plus Large 40/04 für größere Kanäle.

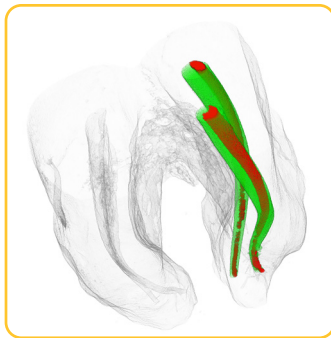

Mikro-CT von S1 Plus Standard.
Zeigt die Fähigkeit des Instruments (grün), den Kanal (rot) zu sondieren.

Effects of three reciprocating single-file NiTi-systems on root canal geometry - A micro-CT analysis

Haupt F et al.
Presenterad at ESE 2019.



S1 Plus Small 15/06



S1 Plus Standard 25/06



S1 Plus Large 40/04

Sicher

Das Risiko eines Instrumentenbruchs wird minimiert.

Wirksam

Das Instrument ist durch seine Schneidekante und den progressiven Steigungswinkel flexibel und effektiv.

Einfache Sondierung

Form und Konzept machen es einfach, den Kanal zu sondieren.

Einfache Anwendung

Die Instrumente werden steril in einer Blisterpackung geliefert und sind sofort einsatzbereit.



Art.No.

Produktbeschreibung

S1P01BS	S1 Plus Treatment Pack
S1P252506BS	S1 Plus Standard 25/06 - 25 mm
S1P312506BS	S1 Plus Standard 25/06 - 31 mm
S1P251506BS	S1 Plus Small 15/06 - 25 mm
S1P311506BS	S1 Plus Small 15/06 - 31 mm
S1P254004BS	S1 Plus Large 40/04 - 25 mm
S1P314004BS	S1 Plus Large 40/04 - 31 mm



och S1 are registered trademarks of Directa AB. | www.sendoline.com

DIRECTA