

Sendoline®

PERFECT ENDO

S1 - RECIPROKERANDE ENFILSSYSTEM



Enkelt. Säkert. Komplett.

Med S1-systemet har du möjlighet att rotbehandla med endast en maskinell fil.

Det smarta S1-vinkelstycket har en unik integrerad växellåda som skapar den reciprokerande rörelsen direkt i vinkelstycket vilket ger en mjuk arbetsgång. Du ansluter vinkelstycket direkt till din tandläkarunit

utan behov av en extern motor. I de flesta fall används S1 Plus Standard 25/06.

S1-systemet innehåller även sterilförpackade pappersspetsar och storleksanpassade gutta-perkaspetsar till filarna S1 Plus Standard och S1 Plus Large. S1 - ett komplett, kompakt system.



S1 Plus Start Up Set 2.0*

S1 -E Plus Start Up Set 2.0 REF OP0007

Innehåll:

- 1 x S1 vinkelstycke inkl. 1 apex clip
- 6 x S1 Plus Treatment Pack**
- 1 x S1 Plus Standard 25/06 - 25 mm
- 1 x S1 Plus Small 15/06 - 25 mm
- 1 x S1 Plus Large 40/04 - 25 mm

*Totalt 30 st S1 Plus-filar.



**S1 Plus Treatment Pack
(räcker till två rotbehandlingar)

- 2 x K-File 10 STERILE - 25 mm
- 2 x K-File 15 STERILE - 25 mm
- 2 x S1 Plus Standard 25/06 - 25 mm



och S1 är varumärkesregistrerat av Directa AB. | www.sendoline.com

DIRECTA

Sendoline®


PERFECT ENDO

S1 PLUS-FILEN



Effektiv. Flexibel. Säker.

S1 Plus-filen har Sendolines unika S-profil med dubbla avverkande egggar vilket är optimalt för S1-systemets reciprokerande rörelse. Filens förlängda vridningar och avrundade spets gör den flexibel med mycket god kanalföljsamhet. I de flesta fall används S1 Plus Standard 25/06. Behandlar du smala, trånga kanaler väljer du istället S1 Plus Small 15/06 och för större kanaler S1 Plus Large 40/04.

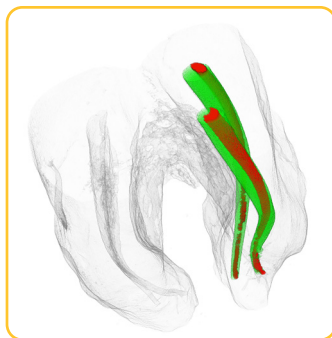

Micro-CT av S1 PLUS.
Visar filens (grön) följsamhet
i kanalen (röd).

*Effects of three reciprocating single-file
NiTi-systems on root canal geometry
- A micro-CT analysis*

Haupt F et al.
Presenterad på ESE 2019.

Säker

Minimerad risk för filfraktur.

Effektiv

Filens skär och förlängda vridningar
gör den flexibel och effektiv.

Följsam

Utformningen och designen gör den
följsam i kanalen.

Enkel hantering

Filarna levereras sterilförpackade i blister.
Färdiga att använda.



S1 Plus Small 15/06



S1 Plus Standard 25/06



S1 Plus Large 40/04



REF

Produkt beskrivning

S1P01BS	S1 Plus Treatment Pack
S1P252506BS	S1 Plus Standard 25/06 - 25 mm
S1P312506BS	S1 Plus Standard 25/06 - 31 mm
S1P251506BS	S1 Plus Small 15/06 - 25 mm
S1P311506BS	S1 Plus Small 15/06 - 31 mm
S1P254004BS	S1 Plus Large 40/04 - 25 mm
S1P314004BS	S1 Plus Large 40/04 - 31 mm

