



# S1 – REZIPROKES EING FEILEN SYSTEM

Einfach. Sicher. Vollständig



**Sendoline**<sup>®</sup>

# S1 WINKELSTÜCK

Das intelligente S1-Winkelstück verfügt über ein einzigartiges integriertes Getriebe, das die reziproke Bewegung direkt im Winkelstück erzeugt und so einen glatten Betrieb ermöglicht. Sie schließen das Winkelstück direkt an Ihre Dentaleinheit an, ohne einen externen Motor zu benötigen.



## Einfach

Das S1-Winkelstück wird direkt auf den Motor des Geräts aufgesteckt. Sie steuern das Handstück mit dem Fußschalter, um die volle Geschwindigkeit zu erreichen.

## Sicher

Die Kombination aus der reziproken Bewegung und der Elastizität der für das Instrument verwendeten Nickel-Titan-Legierung minimiert das Risiko eines Instrumentenbruchs.

## Zuverlässig

Es wird kein externer Motor benötigt, und es müssen keine Batterien aufgeladen werden.

## Kostengünstige Hygieneroutinen

Das Winkelstück S1 wird genauso gereinigt und gehandhabt wie Ihre anderen Winkelstücke. Sie benötigen keinen zusätzlichen Adapter in Ihrer Schmier- und Reinigungsmaschine.

## Das intelligente Zubehör


Mit dem beiliegenden S1-Apex Clip lässt sich ein Apexlokalisator einfach an das Handstück anschließen.

# S5 Apex Locator

Verwenden Sie einen Apexlokalisator, um die Länge des Wurzelkanals zu bestimmen. Verbinden Sie das S1-Winkelstück einfach mittels des mitgelieferten S1-Apex Clips mit einem Apexlokalisator.



# S1 PLUS INSTRUMENT

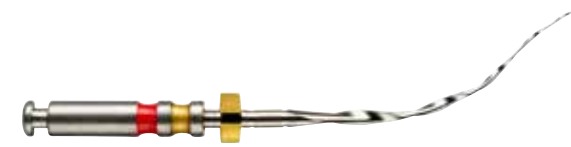

Mit dem S1-System können Sie eine Wurzelkanalbehandlung mit einem einzigen mechanischen Instrument durchführen.

Das S1 Plus-Instrument verfügt über das einzigartige S-Profil von Sendoline mit doppelten Schneidkanten und ist somit optimal für die reziproke Bewegung des S1-Systems geeignet.

Der progressive Steigungswinkel und die abgerundete Spitze des Instruments sorgen für Flexibilität und erleichtern das Sondieren des Kanals.

## Sicher

Das Risiko eines Instrumentenbruchs wird minimiert.

## Wirksam

Das Instrument ist durch seine Schneidekante und den progressiven Steigungswinkel flexibel und effektiv.


## Einfache Sondierung

Form und Konzept machen es einfach, den Kanal zu sondieren.

## Einfache Anwendung

Die Instrumente werden steril in einer Blisterpackung geliefert und sind sofort einsatzbereit.


## NACHGEWIESENE FÄHIGKEIT ZUR SONDIERUNG DES KANALS UND BESTÄNDIGKEIT DES MATERIALS

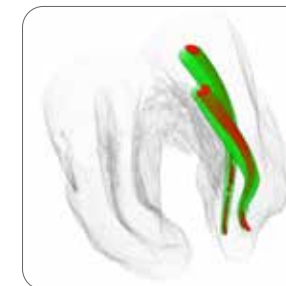

Mikro-CT des S1 Plus Standard. Zeigt die Fähigkeit des Instruments (grün), den Kanal (rot) zu sondieren.

Effects of three reciprocating single-file NiTi-systems on root canal geometry - A micro-CT analysis

Haupt F et al.  
Präsentiert auf dem 19th Biennial ESE Congress

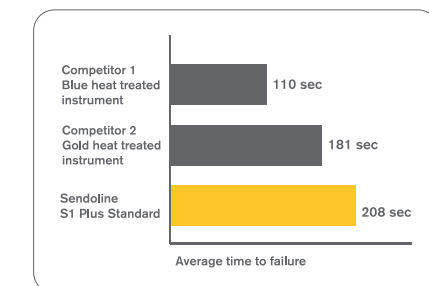

Widerstandsfähigkeit gegen zyklische Ermüdung.

Data on file.

# KOMPLETTES KOMPAKTSYSTEM

Mit dem S1-System können Sie Ihre Wurzelbehandlung mit einem einzigen mechanischen Instrument durchführen. S1 Plus Standard 25/06 wird für die meisten Fälle verwendet. Wählen Sie S1 Plus Small 15/06, wenn Sie enge oder gekrümmte Kanäle behandeln, und S1 Plus

Large 40/04 für größere Kanäle. Das S1-System umfasst auch sterile Packungen mit Papier- und Guttapercha-Spitzen in der entsprechenden Größe für die S1 Plus Standard- und S1 Plus Large-Instrumente.

S1 – ein komplettes Kompaktsystem.



S1 Plus Standard 25/06



S1 Plus Small 15/06

Wenn der S1 Plus Standard 25/06 die ermittelte Arbeitslänge nicht erreicht.



S1 Plus Large 40/04

In größeren Kanälen, in denen eine K-File 20 leicht die ermittelte Arbeitslänge erreicht.

# MOVEMENT BY SWEDEN

Das S1-System – reziprok, leichtgängig und flexibel. Wie ein Tanz.

## PRODUKTÜBERSICHT

Art.No.	Beschreibung des Produkts	Menge
6542471-1	S1-E Winkelstück für Elektromotor (40.000 rpm)*	Kit
6542472	S1-E Winkelstück für Elektromotor (40.000 rpm)**	Kit
OP0007	S1-E Plus Start Up Set 2.0***	Set
6583566	S1 Apex Clip dia. 2.0 mm	1 Stück/Karton
S1P01BS	S1 Plus Treatment Pack	6 Stück/Karton
S1P252506BS	S1 Plus Standard 25/06 - 25 mm	6 Stück/Karton
S1P312506BS	S1 Plus Standard 25/06 - 31 mm	6 Stück/Karton
S1P251506BS	S1 Plus Small 15/06 - 25 mm	6 Stück/Karton
S1P311506BS	S1 Plus Small 15/06 - 31 mm	6 Stück/Karton
S1P254004BS	S1 Plus Large 40/04 - 25 mm	6 Stück/Karton
S1P314004BS	S1 Plus Large 40/04 - 31 mm	6 Stück/Karton
259-705	S1 Paper Points Standard	120 Stück/Karton
258-708	S1 Paper Points Large	120 Stück/Karton
159-605	S1 Gutta Percha Standard	60 Stück/Karton
158-608	S1 Gutta Percha Large	60 Stück/Karton
385S15001	S5 Apex Locator	Kit

\*Beinhaltet 1x S1 Plus Treatment Pack

\*\*Beinhaltet 1x Sendoline S3 Assortment

\*\*\*Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertriebsmitarbeiter oder an Directa.